

Incubateur à agitation IncubatorGenie® à plate-forme magnétique

vitesse réglable 5 à 35 tr/min 6 à 70 osc/min	charge maxi 4,5 kg	temp. maxi +75°C
---	-----------------------	---------------------


agitation de tous types de
conteneurs sur tous les
angles et dans toutes les
positions



- mouvements balançoire (10°) et rotation (360°)
- incubateur à convection forcée : homogénéité ±0,5°C
- affichage digital vitesse et température
- grande gamme d'accessoires
- **mouvement 3D** : le plateau spécial SN2501 transforme le secoueur en secoueur 3D

		IncubatorGenie®
vitesse réglable	rotation balançoire	3 à 35 tr/min 6 à 70 osc/min
dimensions internes	24 litres 254 x 362 x h260 mm	
température	+28 à +75°C ±0,2°C	
stabilité / homogénéité	±0,1°C / ±0,5°C	
charge maximum	4,5 kg	
angle balançoire	10°	
dim. (lpxh) / poids	400 x 560 x h368 mm / 19 kg	
alimentation	230 V - 50 Hz	
Incubateur IncubatorGenie®	SN2500	
plate-forme agitation 3D	SN2501 [1]	
étagère-grille suppl.	SN2502 [2]	

- **livré complet avec :**
- 1 plate-forme magnétique,
- 4 bandes magnétiques inox pour fixer des sachets 150 x 150 mm [9]
- 1 plateau magnétique anti-dérapant [10]
- portoirs magnétiques avec pinces :
- 1 portoir 12 pinces pour tubes Ø10/13 mm [3]
- 1 portoir 6 pinces pour tubes Ø15/17 mm [4]
- 1 portoir 3 pinces pour tubes Ø28/30 mm [5]
- 1 étagère-grille empilable [2]
- les bandes, portoirs et plateaux aimantés se fixent sur la plate-forme magnétique, possibilité de fixer plusieurs dispositifs ensemble

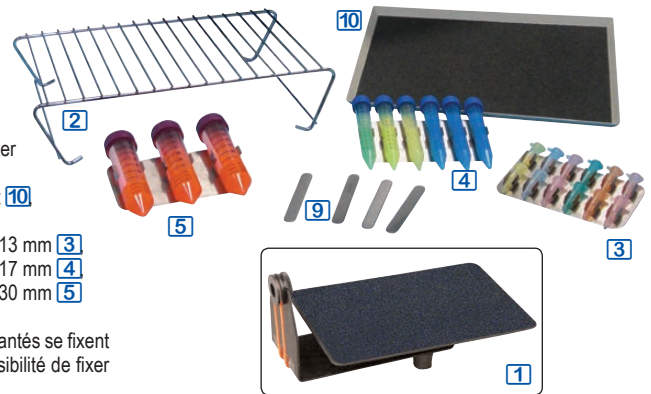

Accessoires supplémentaires pour plates-formes magnétiques

Portoirs magnétiques à pinces, pour tubes



Plateaux	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		à l'unité		pack de 6
Portoirs 12 pinces, tubes Ø10/13 mm [3]	SN1101	l'unité	SN1111	les 6
Portoirs 6 pinces, tubes Ø15/17 mm [4]	SN1102	l'unité	SN1112	les 6
Portoirs 3 pinces, tubes Ø28/30 mm [5]	SN1103	l'unité	SN1113	les 6
Portoirs 2 pinces, tubes à hybridation [6]	SN1104	l'unité	-	-
Portoirs 6 pinces, fioles 100 ml [7]	SN1105	l'unité	-	-
Portoir universel + 2 élastiques [8]	SN1106	l'unité	-	-

Bandes magnétiques pour sachets



référence	Prix HT
SN1109	Bandes magnétiques, les 16

Boîtes magnétiques pour microtubes



référence	Prix HT
SN1114	Boîte 50 microtubes [11]
SN1115	Boîte 100 microtubes [12]